

電子體重計說明書

產品基本特性

- 帶語音開關按鍵(BY-828)
- 選用高精度傳感器
- 8mm優質鋼化安全玻璃
- 秤重範圍：6 - 180kg(BY-828) / 3-200kg(BY-823)
- 分度值：100g
- 自動上秤開機秤重功能
- 自動零點跟蹤功能
- 自動關機功能
- 超載提示
- 低電量提示
- 最大公差值:+-0.30kg

使用電源


產品出廠時已附使用電池，請在使用產品之前。

BY-828裝上乾電池*4PCS即可使用。

BY-823裝上乾電池*3PCS即可使用。

使用方法

請平穩地踏上秤面，保持身體平衡，使雙腳平均分擔體重。待站穩後，秤顯示的體重數值即可鎖定。(BY-828此時語音提示“體重+秤重數值+公斤/磅”)

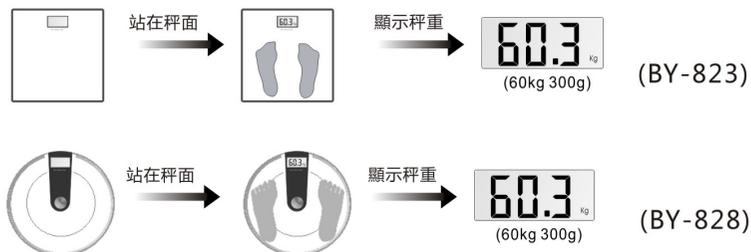

自動關機

每次秤重後，秤會自動關機。重量穩定後約8秒會自動關機。

超載提示

體重超過量程 180kg(BY-828) / 200kg(BY-823)螢幕顯示

Err

如右側提示,請立即離開秤面以免造成損壞。

低電量提示

當秤顯示LO時，需要更換電池，必要時請與當地經銷商聯繫。

重量單位轉換

BY-823：重量單位為kg、st、lb,出廠時重量已設定為kg。產品背面按鍵為單位轉換鍵，如需變換單位，在產品背面轉換，如圖：

BY-828：重量單位為kg，產品背面按鍵為語音開關鍵，如圖：



此按鍵為語音開關按鍵

※注意事項※

- 不可使用化學溶劑清潔秤體，必要時用沾水的布擦秤，但應避免水進入秤體內。玻璃與秤體接觸面請勿浸水。
- 為確保產品壽命，請不要將產品放置在過度濕熱的環境。
- 正常秤重時，本產品僅受靜電壓力，當非正常使用並受到撞擊、或跌落時，容易損壞且會使玻璃破裂造成危險,請小心使用。
- 長期不使用時，請將電池取出，以免造成體重計損壞。